


# 観血式血圧モニタリング 閉鎖式採血システム


MERIT MEDICA®

## 閉鎖式血圧モニタリング・キットの利点

- 患者の感染リスクの低減 - 三方活栓のポート管理の問題点を解消します。
- 術者の感染リスクの低減 - 針刺し事故や血液曝露のリスクを低減します。
- 患者自己血の損失を防ぐ - 採血時の希釈血液の廃棄は必要ありません。
- 採血手技の標準化を図る - 個人差による検査データのばらつきを防ぎます。

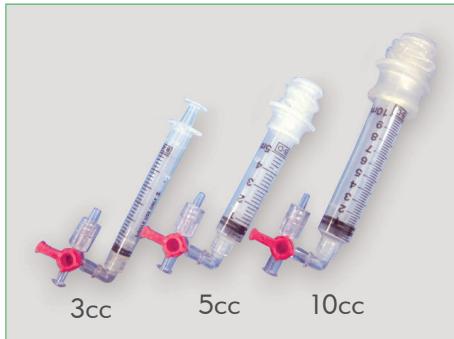

閉鎖式圧ライン用の予備吸引用シリンジ。付属の三方活栓により、シリンジを圧ラインから遮断することで良好な周波数特性を維持します。シリンジ容量は、1~10 mLの間で選択可能で、採血手技の標準化をサポートでき、NICU等でも安心してご使用いただけます。

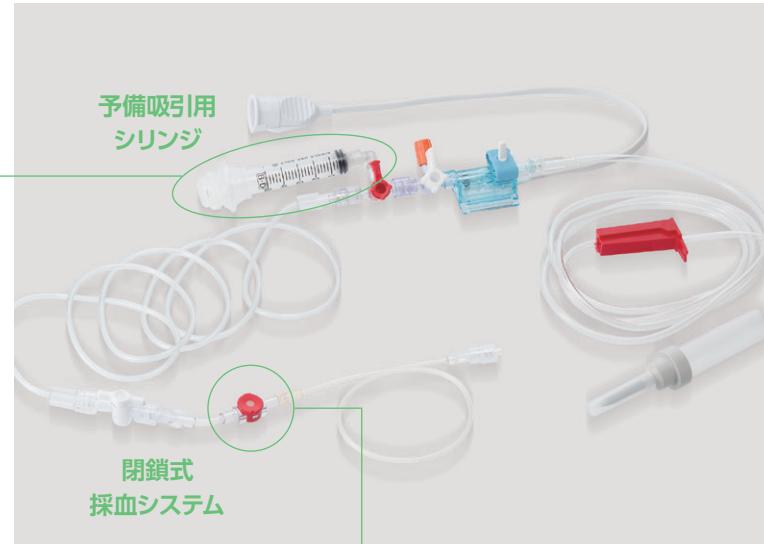


閉鎖式採血システムラインナップ



マーベラス三方活栓




プラネクタ®

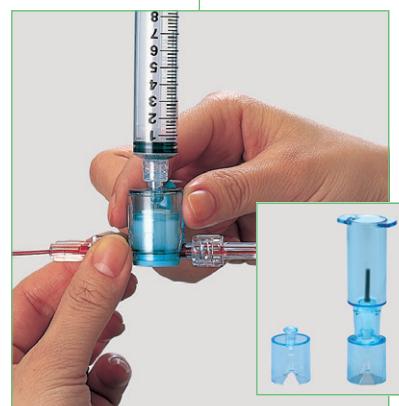

Safedraw™

# 閉鎖式採血システム Safedraw™

MERIT MEDICAL®

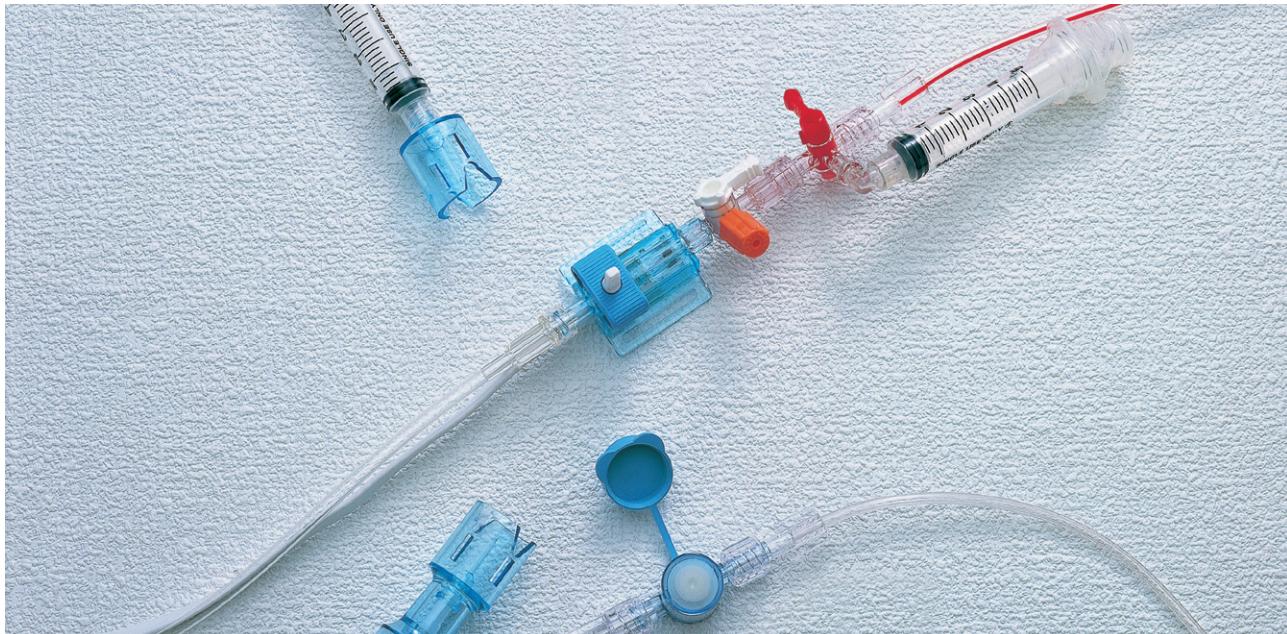


Safedraw™ (セーフドロー) は、専用のアダプタを使用してアクセスするタイプのニードルレス閉鎖式採血システムです。

- 赤・青2色のセパタムカバーでラインの識別が可能
- 針刺し事故を防ぐガード付き専用のセーフニードル (TA-BPN/TA-STV) により医療従事者の安全を確保


## セーフドロー付きスタンダードキット

| カタログ番号 | 688023 | 製品名 | DT-4812SD  | 包装単位 | 1箱5個入 |
|--------|--------|-----|--|------|-------|
|        |        |     | <p>構成 DT-XX ..... 1個<br/>血圧チューブ (30 cm) (細径) ..... 1本<br/>血圧チューブ (120 cm) ..... 1本<br/>セーフドロー (青キャップ) ..... 1個<br/>予備吸引用シリンジ (3 mL) ..... 1個<br/>気泡除去フィルタ付き輸液セット ..... 1本<br/>(マイクロ・ドリップ150 cm)<br/>Easy Vent™キャップ、密閉キャップ、ラベルセット付属</p> |      |       |

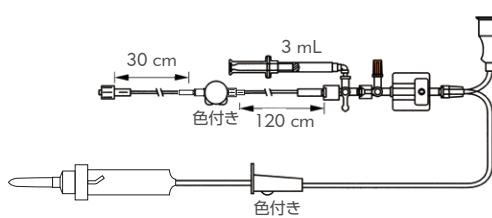

|    |                                |    |
|----|--------------------------------|----|
| 構成 | DT-XX .....                    | 1個 |
|    | 血圧チューブ (30 cm) (細径) .....      | 1本 |
|    | 血圧チューブ (120 cm) .....          | 1本 |
|    | セーフドロー (青キャップ) .....           | 1個 |
|    | 予備吸引用シリンジ (3 mL) .....         | 1個 |
|    | 気泡除去フィルタ付き輸液セット .....          | 1本 |
|    | (マイクロ・ドリップ150 cm)              |    |
|    | Easy Vent™キャップ、密閉キャップ、ラベルセット付属 |    |

## 採血用アダプタ

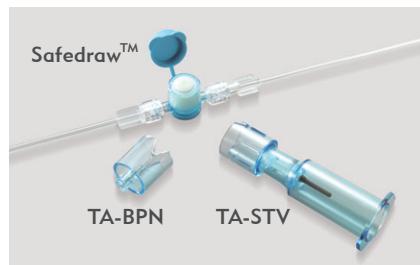

| カタログ番号 | 682159 | 製品名 | TA-BPN | 包装単位 | 1箱50個入 |
|--------|--------|-----|--------|------|--------|
|--------|--------|-----|--------|------|--------|

- 採血管への接続も可能な専用採血ニードル

| カタログ番号 | 682158 | 製品名 | TA-STV | 包装単位 | 1箱25個入 |
|--------|--------|-----|--------|------|--------|
|--------|--------|-----|--------|------|--------|

- 真空採血管へ直接採血が可能な採血管用トランクファーデバイス