# Soft Tissue Biopsy Needles

## לבא−רעדשספרל TEMNO Evolution™

### 適応する主な生検手技

2段階ノッチ (10 mm / 20 mm)


病変に応じて、ノッチサイズを10 mmと20 mmの2段階より選択することが可能です。 微細病変生検に対しても正確な生検を提供します。


#### 4面ベベルチップ



独自の針先端形状により、優れた鋭さと直進性を保持します。素早く容易な穿刺 を可能とし、硬質・繊維質病巣へのチップ穿刺ずれも軽減します。また、周辺臓器 と血管への穿通リスクを低減する為にチップを短くしました。

カラーコード	長さ	カタログ番号
○ 14 <b>G</b>	6 cm	TT146
	11 cm	TT1411
	15 cm	TT1415
	20 cm	TT1420
● 16 G	6 cm	TT166
	11 cm	TT1611
	15 cm	TT1615
	20 cm	TT1620
● 18 G	6 cm	TT186
	11 cm	TT1811
	15 cm	TT1815
	20 cm	TT1820
<b>○</b> 20 G	6 cm	TT206
	11 cm	TT2011
	15 cm	TT2015
	20 cm	TT2020

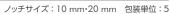

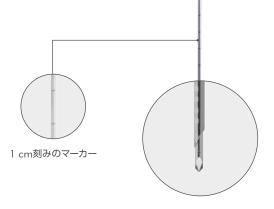

### **オートマチックタイプ Achieve**<sup>™</sup>

適応する主な生検手技

乳房肾臓肝臓

### 2種類のモード選択ボタン

ボタン1つでオートマチックとセミオートマチックのニーズに合わせたモード選択が可能です。 サンプル採取前の針位置確認により、安定した組織捕捉を実現します。

### オートマチックモード

△ボタンを押すと自動的にスタイレット とカニューレを連続して前進させること ができます。

### セミオートマチックモード

□ボタンを押すと自動的にスタイレット が前進します。その後、△ボタンを押す と自動的にカニューレが前進します。



カラーコード	長さ	カタログ番号
○ 14 <b>G</b>	9 cm	A149
	11 cm	A1411
	15 cm	A1415
	20 cm	A1420*
● 16 G	11 cm	A1611
	15 cm	A1615
	20 cm	A1620*
● 18 G	11 cm	A1811
	15 cm	A1815
	20 cm	A1820
	25 cm	A1825
<b>○</b> 20 G	9 cm	A209
	15 cm	A2015
	20 cm	A2020
=====		00 51+144

\*受注生産品

ノッチサイズ: 20 mm 包装単位: 5



名:メリット TEMNO生検針 医療機器認証番号:227AFBZX00123000