



RAISING THE BAR FOR BIOPSY

PRECISION. ACCURACY. CONTROL.

CorVocet™

Automatic Biopsy System


コルボセット 生検システム

Full-Core Specimens, True One-Handed Operation

CorVocetのフルコア生検構造は、一回の生検でより多くの検体採取を実現しました。人間工学に基づいたグリップは、手技開始から完了まで片手での操作を容易にします。精密な射出距離の調節機能で、正常組織への損傷を低減します。



フルコア生検システム

カニューラ内に採取組織を収納する構造になっています。そのため、より多くの組織を一度に採取することが可能になりました。

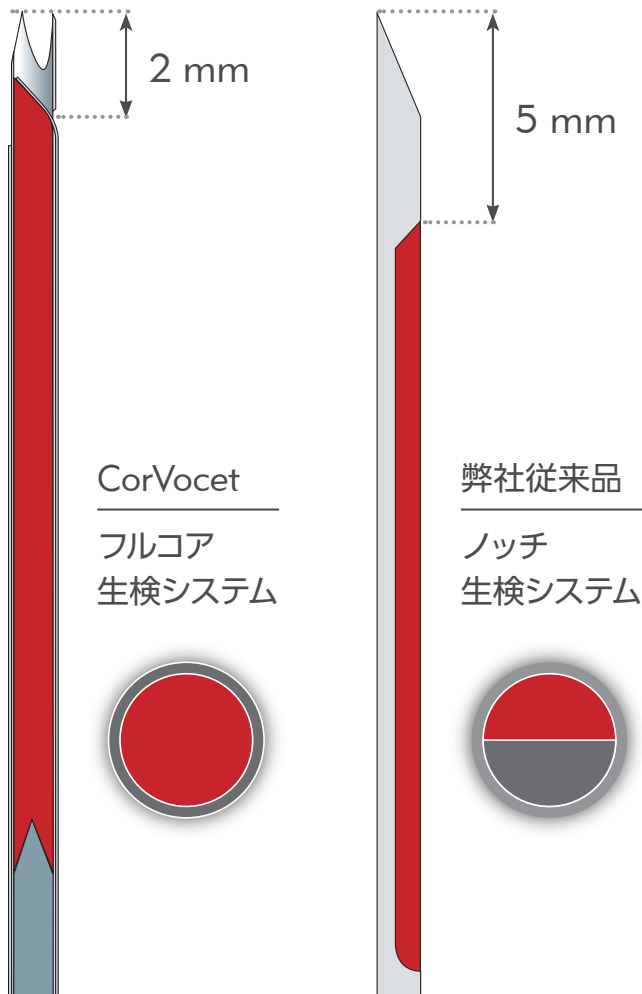

採取イメージ

エコー対応チップ

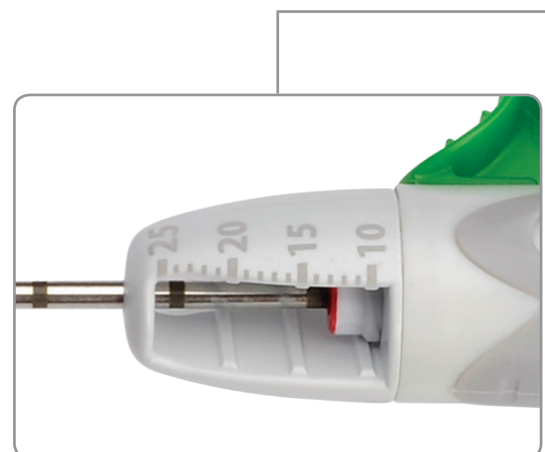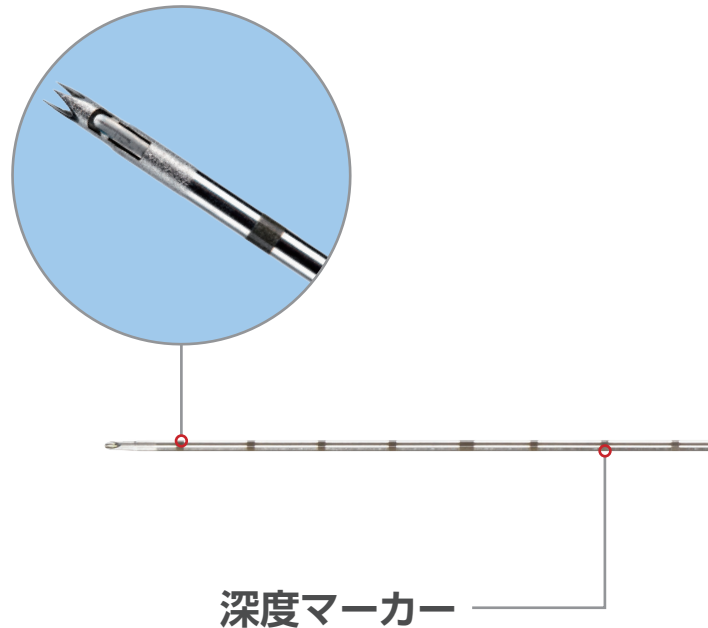

射出距離調節機能

回転式ノブを採用することにより射出距離を10～25 mmの間で、0.5 mm刻みで調節できます。

適応する主な生検手技

乳 房

腎 臓

肝 臓

肺

前立腺

甲状腺

デュアルトリガー


手技の状況に合わせて前後のトリガーを選択して使用することが可能です。

Readyインジケーター

待機状態を目視で確認できます。

コアキシャルイントロデューサ

独自のクイックリリース構造で、回す、捻るなどの操作なしでスタイレットの取外しが可能です。

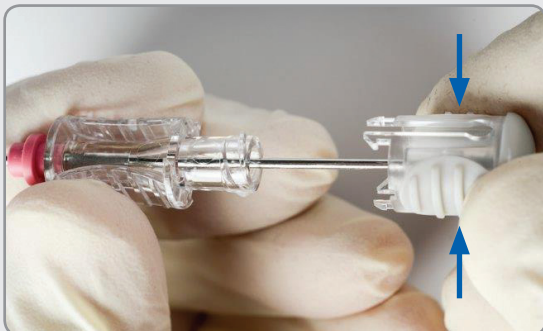

スタイレット


鈍針構造により組織や血管への損傷を低減します。

深度固定用ストッパー

ストッパーはCorVocetのゲージサイズに合わせたカラーコードを採用しています。



バイオプシーニードル

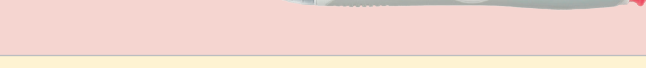構成品	ゲージ	カタログ番号	最大有効長
	14G	CORA1410	10 cm
		CORA1415	15 cm
	16G	CORA1610	10 cm
		CORA1615	15 cm
	18G	CORA1810	10 cm
		CORA1815	15 cm
		CORA1820	20 cm
		CORA1825	25 cm
	20G	CORA2010	10 cm
		CORA2015	15 cm
		CORA2020	20 cm

包装単位：5

コアキシャルイントロデューサ

構成品	対応生検針		イントロデューサ		
	ゲージ	長さ	ゲージ	カタログ番号	有効長
	14G	10 cm	13G	CORC1410	4.4 cm
		15 cm		CORC1415	9.4 cm
	16G	10 cm	15G	CORC1610	4.5 cm
		15 cm		CORC1615	9.5 cm
	18G	10 cm	17G*	CORC1810B	4.5 cm
		15 cm		CORC1815B	9.5 cm
		20 cm		CORC1820B	14.5 cm
		25 cm		CORC1825B	19.5 cm
	20G	10 cm	19G*	CORC2010B	4.6 cm
		15 cm		CORC2015B	9.6 cm
		20 cm		CORC2020B	14.6 cm

*プラントチップスタイルットは17Gおよび19Gのイントロデューサにのみ付属

包装単位：5

バイオプシーニードルキット

構成品	ゲージ	カタログ番号	最大有効長
	14G	CORCA1410	10 cm
		CORCA1415	15 cm
	16G	CORCA1610	10 cm
		CORCA1615	15 cm
	18G	CORCA1810B	10 cm
		CORCA1815B	15 cm
		CORCA1820B	20 cm
		CORCA1825B	25 cm
	20G	CORCA2010B	10 cm
		CORCA2015B	15 cm
		CORCA2020B	20 cm

包装単位：5

販売名：メリット コルボセット 生検システム
医療機器認証番号：231ADBZX00019000



Understand. Innovate. Deliver.™

製造販売業者

メリットメディカル・ジャパン株式会社

〒163-0531 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル

<https://www.merit.com>

■ 注文・納期・在庫のお問い合わせ

カスタマーサービス TEL.03-5989-0200 FAX.03-5909-5851

■ 製品関連・資料請求

お客様AZセンター TEL.03-5989-0201 FAX.03-5909-5402