


血管の計測をより正確に…

■ ナイロン製シャフト

- ・ 抗キンク性のノンブレードシャフトは体温下での耐久性を考慮しています。
- ・ 表面は平滑性に優れているナイロンを使用しています。
- ・ 適合ガイドワイヤー径は.035インチです。


■ X線不透過性

- ・ カテーテルとマーカーバンドは透視下での視認性に優れています。

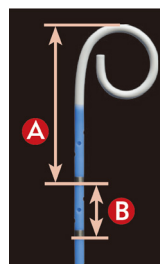

■ プラチナマーカーバンド

- B** 1 mm幅のマーカーバンドが1 cm間隔で20個ついています。
- ・ 19 cmの計測ができます。血管内腔長をより正確に計測することが可能です。

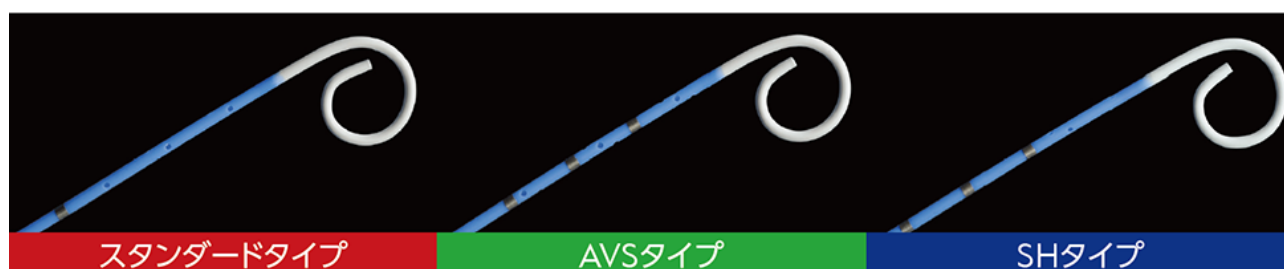

スタンダードタイプ

AVSタイプ

SHタイプ

プラチナマーカーバンドがピッグテールカーブより遠位に配置されています。

- A** 最初のプラチナマーカーバンドまでの長さ：約55 mm

プラチナマーカーバンド間に側孔があり、マーカーを確認しながら血管内に素早く造影剤を充填できます。

- A** 最初のプラチナマーカーバンドまでの長さ：約30 mm

プラチナマーカーバンドがピッグテールカーブの近位に配置されています。

- A** 最初のプラチナマーカーバンドまでの長さ：約39 mm

先端形状	カタログ番号	先端タイプ	外径	内径	有効長 (cm)	側孔数	マーカー長	マーカー数
ピッグテール	1623-F220M	AVS	4 F	.052"	100		1 mm	20
	1623-F720M	SH				5		
	1624-B420M	STD	5 F			10		
	1624-C820M	AVS						
モディファイド バーテブラル	1624-C120M	20°アングル	5 F	.052"	65	—	1 mm	20
	1624-D320M							
	1624-C220M	—			70	8		
	1624-C920M	VERT 2			100	8		

最大流量			
外径	有効長(cm)	mL/sec	psi/kgf/cm ²
4 F	65	21	1192/84
	100	17	1190/84
5 F	65	35	1190/84
	100	27	1196/84

包装単位：1

1



① モディファイドバーテブラル